




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	Toiletsæde Dania med åben front, uden låg, 50 mm forhøjet R21000
Farve	VVS:615664000 NRF:6190524 EAN:5708590070452 HMI: 1813 NBS:N13:300 Hvid
Produktbeskrivelse	 Toiletsæde Dania med åben front, 5 cm forhøjet, uden låg. Med specialbeslag tilpasset forhøjet sæde. Sædet er forsynet med styrebuffer, som sikrer at sædet sidder mere stabilt - også ved sideværts belastninger. Materialer: Duroplast. Toiletsæde Dania med åben front, 5 cm forhøjet, uden låg. Med specialbeslag tilpasset forhøjet sæde. Sædet er forsynet med styrebuffer, som sikrer at sædet sidder mere stabilt - også ved sideværts belastninger. Materialer: Duroplast.
Produktkapacitet	Dette produkt er testet statisk med 225 kg. Da den europæiske hjælpemiddelstandard DS/EN 12182:2012 foreskriver test med sikkerhedsfaktor 1,5 er produktets nominelle maksimalbelastning derfor 150 kg.
Materialer	Sæde: Hærdeplast (urea) Hængsel: Rustfrit stål V2A Toiletforhøjer: Nylon (PA) Drejetapbuffer: ABS-plast
Ergonomi	Et anatomisk velformet sæde, som er velegnet for de fleste. Sideværts forflytninger er lette, idet sædet er relativt fladt. Er designet med åben front, hvilket gør det egnet som bidetsæde med let adgang for en håndbruser. Egner sig til hospitaler, idet de fleste bækkener passer ned i skålen, mens hanken placeres i den åbne front. Forhøjet 5 cm for at gøre det lettere at rejse og sætte sig.

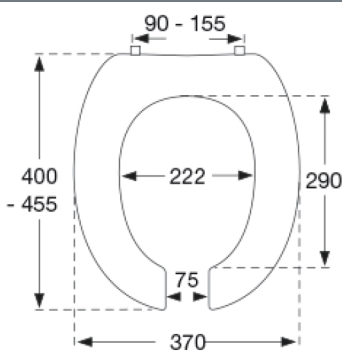

PRESSALIT®

Produkt	Toiletsæde Dania med åben front, uden låg, 50 mm forhøjet
Varenummer	R21000
Garanti	Pressalit giver 10 års garanti på dit toiletsæde mod forevisning af købsbevis. I tilfælde af en reklamation skal du kontakte den forhandler eller butik, hvor du har købt sædet. Ved reklamation over materiale- og / eller produktionsfejl og / eller funktionsbegrænsninger, der forekommer inden for 10 år, efter korrekt brug og rengøring af toiletsædet (vi forbeholder os ret til at undersøge dette på vor fabrik), sender Pressalit reservedele eller ombytter toiletsædet til samme eller lignende model. Hvis farven ikke længere er tilgængelig, forbeholder Pressalit sig retten til at ombytte toiletsædet til en tilsvarende model i farven hvid. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele, forlænges eller fornyes garantiperioden ikke. Kan der ikke ske en ombytning, er Pressalit berettiget til i stedet at tilbagebetale købesummen.
Rengøring	Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af toiletsædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Til desinficering af sædet kan f.eks. anvendes ethanol 85%. Det er vigtigt at sædet aftørres med en blød klud vredet op i rent vand efter desinficering, og at det herefter aftørres med en tør og blød klud. <i>Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.</i> Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

pressalit.com