




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	Bruseplejebriks 3000, fastmonteret R8508021
Farve	VVS: 777540184 NRF: 7501963 EAN: 5708590265544 HMI: 42820 NBS: N13:40,375 FDA: INT/D124320 Blygrå
Produktbeskrivelse	 Udgået pr. 31/12-2018 og erstattet af R8528 Bruseplejebriks 3000, fastmonteret. Opklappelig. Inkl. vandopsamlingsbakke med integreret afløb. Liggeflade 1800 mm, udvendige mål: 970 mm x 1910 mm. Materialer: Pulverlakeret stål, aluminium, PUR-skum og polystyren. Inkl. monteringsbolte til massiv mur. Udgået pr. 31/12-2018 og erstattet af R8528 Bruseplejebriks 3000, fastmonteret. Opklappelig. Inkl. vandopsamlingsbakke med integreret afløb. Liggeflade 1800 mm, udvendige mål: 970 mm x 1910 mm. Materialer: Pulverlakeret stål, aluminium, PUR-skum og polystyren. Inkl. monteringsbolte til massiv mur.
Justerbarhed	Fastmonteret
Produktkapacitet	Maksimal belastning: 200 kg. Når briksen belastes med 200 kg, belastes hver monteringsbolt med 60 kg
Materialer Ergonomi	Aluminium, porsukum, kunststof og lakeret stål. Pressalit Care tilbyder et bredt program af faste og fleksible bruseplejebrikse i høj kvalitet. De er designet til at yde en stabil platform for omklædning og pleje af voksne og børn, fx. i skoler, institutioner, hospitaler og i private hjem. 3000 serien byder på maksimal sikkerhed og komfort. Ud over et prisbelønnet design, inkluderer serien komfortable og holdbare overflader af polyuretanskum og aluminium. Flexibiliteten giver både optimale arbejdsbetingelser for hjælperen og et højt komfort- og sikkerhedsniveau for brugeren.

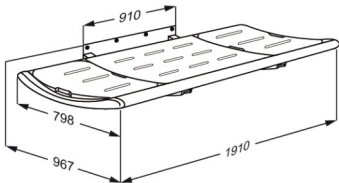

Produkt Varenummer	Bruseplejebriks 3000, fastmonteret R8508021
Funktioner	Vandopsamlingsbakke med integreret afløb forhindrer oversprøjtning af personale og gulv. Slangen fra det centralt placerede afløb i vandopsamlingsbakken føres til afløb i gulv eller væg. Lejets svagt buede form medvirker til optimal liggekomfort og sikkerhed. Indstillelig nakkestøtte, kan placeres i begge ender. Den integrerede gascylinder gør det let at slå lejet op, så det kun optager minimal plads, når det ikke er i brug.
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 3 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl. BEMÆRK Hvis produktet placeres i salt- eller klorholdige omgivelser, reduceres garantien fra de normale 3 år til 1 år. Salt og klor kan have en ætsende virkning på produktets komponenter og vil nedsætte produktets forventede levetid.
Rengøring	Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade. Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen. DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: WipeClean Ethanol Disinfection 80% Wetwipe Ethanol Disinfection 70% Accel PREVention Wipes Lingettes IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Wetwipe Universal Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted. AFKALKNING AF ALUMINIUMDELE: Pressalit anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre og 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand.



PRESSALIT®

Produkt	Bruseplejebriks 3000, fastmonteret
Varenummer	R8508021

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®