




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	Løfteenhed til bordplade, elektrisk højderegulerbar RK1082
Produktbeskrivelse	EAN: 5708590293783 HMI: 61267  Navnet INDIVO relaterer til produkternes individuelle konfiguration. Elektrisk løfteenhed til fritstående bord. Til bordplader på 2001 - 2400 mm. 300 mm højderegulerbar. Inkl. 2 teleskopben, bæringer, længde- og tværprofiler samt kontakt til betjening. Pressalit anbefaler udhæng på 400 mm i begge ender af bordet for at gøre plads til kørestolsbrugeren.
Justerbarhed Reguleringshøjde	Højderegulerbar 300 mm
Produktkapacitet	Maksimal belastning (jævnt fordelt): 100 kg inkl. bordplade.
Hastighed opad	Hastighed op: 20 mm/s Hastighed ned: 20 mm/s
Støjniveau	45 dB
Ergonomi	En fritstående elektrisk Indivo-løsning er en fleksibel arbejds-, spise- eller opholdsplads primært beregnet til brug i køkkenet. Løsningen kan hurtigt og enkelt tilpasses i højden til den aktuelle bruger og brugssituation. Et fritstående bord kan også være løsningen i rum, hvor væggene ikke er stærke nok til at bære de væghængte modeller.

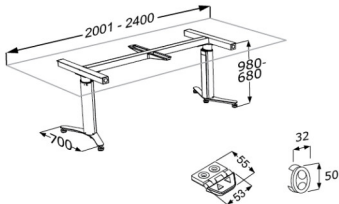

Produkt	Løfteenhed til bordplade, elektrisk højderegulérbar
Varenummer	RK1082
Funktioner	Løfteenheder højdereguleres ved hjælp af kontakter i sargen eller direkte under bordpladen. Kontakter til betjening kan placeres efter ønske. Udformningen af ben og fødder gør bordet stabilt og sikrer, at løfteenheden er til mindst mulig gene for kørestolsbrugere. Løfteenhedens konstruktion gør det muligt at benytte bordet fra alle sider. Løfteenhederne kan højdereguleres 300 mm. Løfteenhederne fås til bordplader i alle længder mellem 1400 mm og 3000 mm og i bredder mellem 700 mm og 1000 mm.
Aktuator (motor)	DB4 Deskline (Linak) 1000 N, IP22
Styreboks	CBD4 (Linak) IP22
Strømforbrug (max. belastning)	Strømforbrug, maksimal belastning: 300 W Strømforbrug, standby: 2 W
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 3 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.



Produkt	Løfteenhed til bordplade, elektrisk højderegulérbar
Varenummer	RK1082
Rengøring	Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade. Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen. DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted. AFKALKNING AF ALUMINIUMDELE: Pressalit anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre og 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand.