




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	PLUS brusesæde 310, manuelt højderegulérbart R7320112000
Farve	VVS: 777533200 NRF: 6311143 EAN: 5708590309545 HMI: 71806 NBS: N13:448 FDA: INN/D135865 Hvid
Produktbeskrivelse	 PLUS brusesæde 310, med ryg- og armlæn. Manuelt højderegulérbart 230 mm uden brug af værktøj. Armlæn kan højdereguleres uafhængig af sæde og ryglæn. Sæde og armlæn er opklæpelige. Antracitgrå afdækningsplade på lodret vægskinne. Materialer: Blødt og komfortabelt PUR-skum med trækerne, monteret på aluminiumprofil. Armlænenes gribeblader i termoplastisk elastomér er slidstærke og rengøringsvenlige. Ekskl. monteringsbolte. PLUS brusesæde 310, med ryg- og armlæn. Manuelt højderegulérbart 230 mm uden brug af værktøj. Armlæn kan højdereguleres uafhængig af sæde og ryglæn. Sæde og armlæn er opklæpelige. Antracitgrå afdækningsplade på lodret vægskinne. Materialer: Blødt og komfortabelt PUR-skum med trækerne, monteret på aluminiumprofil. Armlænenes gribeblader i termoplastisk elastomér er slidstærke og rengøringsvenlige. Ekskl. monteringsbolte.
Justerbarhed Reguleringshøjde Produktkapacitet	Højderegulérbar 230 mm Maksimal brugervægt (sæde): 200 kg. Maksimal belastning for armlæn er 55 kg. Når sædet belastes med 200 kg, belastes hver monteringskrue med 23 kg. <i>PLUS brusesæder er testet statisk med en sikkerhedsfaktor på 1,5 i henhold til de anvendte hjælpemiddelstandarder.</i>

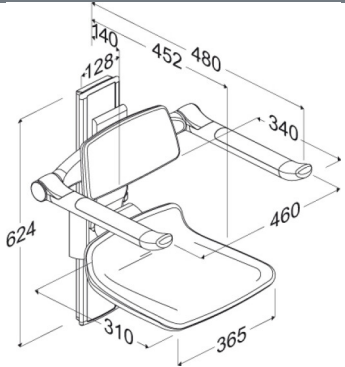

PRESSALIT®

Produkt Varenummer	PLUS brusesæde 310, manuelt højderegulérbart R7320112000
Materialer	Brusesædet er hovedsagelig fremstillet af aluminium anodiseret 10 my. Sædet består af polyurethanskum der er støbt omkring en kerne af krydsfinér, og omstøbt med en overflade af klar PU-lak. Afslutningerne på ryglæn og sæde er forseglet med endepropper i ABS.
Garanti Rengøring	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl. Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade. Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen. DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Erisan OXY+ Tvættsprit 70% CaviCide surface disinfectant decontaminant cleaner Rodalon Desinfektionsspray Terralin protect (SCHÜLKE+) Dismonzon Plus (BODE Chemie GmbH) IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Wetrok Caledor (Wetrok) Petrosol Citro (Büfa) Vigtigt: PUR-overflader på PLUS brusesæder og PLUS ryglæn indeholder en anti-bakteriel coating, som kan blive ødelagt såfremt der anvendes andet end vand og sæbe til rengøring. Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted. AFKALKNING AF ALUMINIUMDELE: Pressalit anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre og 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand.



PRESSALIT®

Produkt	PLUS brusesæde 310, manuelt højderegulérbart
Varenummer	R7320112000

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®