




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	PLUS brusesæde 450 med hul, manuelt højderegulérbart R7431112000
Farve	VVS: 777536000 NRF: 6311176 EAN: 5708590312057 HMI: 71818 NBS: N13:448 FDA: INN/D135865 Hvid
Produktbeskrivelse	 PLUS brusesæde 450 med hul, med ryg- og armlæn. Manuelt højderegulérbart 175 mm uden brug af værktøj. Armlæn kan højdereguleres uafhængig af sæde og ryglæn. Sæde og armlæn er opklappelige. Antracitgrå afdækningsplade på lodret vægskinne. Materialer: Blødt og komfortabelt PUR-skum med trækerne, monteret på aluminiumprofil. Armlænenes gribeflader i termoplastisk elastomér er slidstærke og rengøringsvenlige. Ekskl. monteringsbolte. PLUS brusesæde 450 med hul, med ryg- og armlæn. Manuelt højderegulérbart 175 mm uden brug af værktøj. Armlæn kan højdereguleres uafhængig af sæde og ryglæn. Sæde og armlæn er opklappelige. Antracitgrå afdækningsplade på lodret vægskinne. Materialer: Blødt og komfortabelt PUR-skum med trækerne, monteret på aluminiumprofil. Armlænenes gribeflader i termoplastisk elastomér er slidstærke og rengøringsvenlige. Ekskl. monteringsbolte.
Justerbarhed	Højderegulérbar
Reguleringshøjde	175 mm
Produktkapacitet	Maksimal brugervægt (sæde): 200 kg. Maksimal belastning for armlæn er 55 kg. Når sædet belastes med 200 kg, belastes hver monteringsskrue med 21 kg. <i>PLUS brusesæder er testet statisk med en sikkerhedsfaktor på 1,5 i henhold til de anvendte hjælpemiddelstandarder.</i>

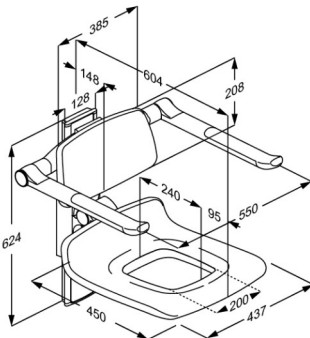

PRESSALIT®






Produkt Varenummer	PLUS brusesæde 450 med hul, manuelt højderegulérbart R7431112000
Materialer	Brusesædet er hovedsagelig fremstillet af aluminium anodiseret 10 my. Sædet består af polyurethanskum der er støbt omkring en kerne af krydsfinér, og omstøbt med en overflade af klar PU-lak. Afslutningerne på ryglæn og sæde er forseglet med endepropper i ABS.
Garanti Rengøring	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl. Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade. Vigtigt: PUR-overflader på PLUS brusesæder og PLUS ryglæn indeholder en anti-bakteriel coating, som kan blive ødelagt såfremt der anvendes andet end vand og sæbe til rengøring. Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted. AFKALKNING AF ALUMINIUMDELE: Pressalit anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre og 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand.







PRESSALIT®

Produkt	PLUS brusesæde 450 med hul, manuelt højderegulérbart
Varenummer	R7431112000

Montering i forskellige vægtyper

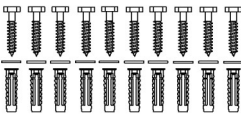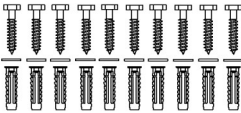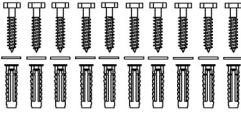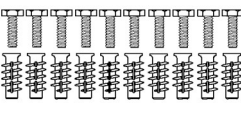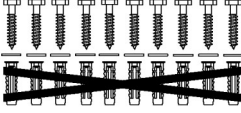	Beton >B25 V8612 - Monteringssæt, 10 stk franske skruer Ø8 x 70, dübel SX10. Skal bestilles separat.	
	Mursten >= Mz12 V8612 - Monteringssæt, 10 stk franske skruer Ø8 x 70, dübel SX10. Skal bestilles separat.	
	Kalksten >= Hlz12 V8612 - Monteringssæt, 10 stk franske skruer Ø8 x 70, dübel SX10. Skal bestilles separat.	
	Gasbeton P4 V8662 - Monteringssæt, 10 stk undersænkede bolte M8 x 35, dübel FTP M 8. Skal bestilles separat.	
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med træforstærkning V8612 - Monteringssæt, 10 stk franske skruer Ø8 x 70, dübel SX10. Dübler skal ikke anvendes. Skal bestilles separat.	

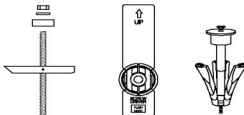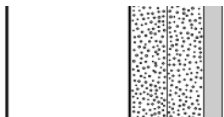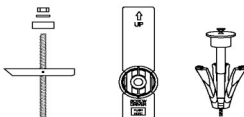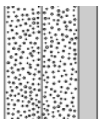

Produkt Varenummer	PLUS brusesæde 450 med hul, manuelt højderegulérbart R7431112000
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med 22 mm krydsfinér Befæstigelse til væg (10 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende. 
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med stålplader 2 mm Befæstigelse til væg (10 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende. 
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast Befæstigelse til væg (10 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende. 