




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	PLUS ryglæn til fastmontering R6515000
Farve	VVS: 777538300 NRF: 6190617 EAN: 5708590325286 NBS: N13:426 Hvid
Produktbeskrivelse	 PLUS ryglæn, 385 mm, polstret, til SELECT toiletløfter. Materialer: Aluminium, blødt purskum med trækerne. Skal monteres direkte på SELECT toiletløfter, monteringskit medfølger. PLUS ryglæn, 385 mm, polstret, til SELECT toiletløfter. Materialer: Aluminium, blødt purskum med trækerne. Skal monteres direkte på SELECT toiletløfter, monteringskit medfølger.
Justerbarhed	Fastmonteret
Produktkapacitet	Maksimal belastning: 100 kg.
Materialer	Ryglænet er fremstillet i PUR-skum og er overtrukket med en klar overfladelak i PUR.
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.

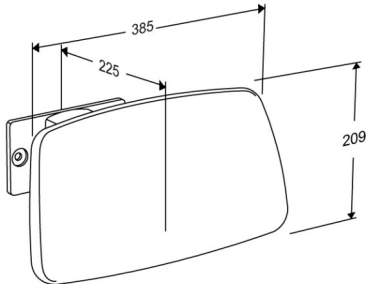

PRESSALIT®

Produkt	PLUS ryglæn til fastmontering
Varenummer	R6515000
Rengøring	Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade. Vigtigt: PUR-overflader på PLUS brusesæder og PLUS ryglæn indeholder en antibakteriel coating, som kan blive ødelagt såfremt der anvendes andet end vand og sæbe til rengøring. Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted. AFKALKNING AF ALUMINIUMDELE: Pressalit anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre og 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand.

pressalit.com

PRESSALIT®